

Your Partner in Medication

yuyama

自動薬剤ピッキング装置

DrugStation®

取り間違いなく安全に。
ピッキング業務は新たなSTAGEへ。

自動薬品箱入出庫装置
DS Box Unit

後付け対応可

DrugStation本体に連結することで、
トレイ管理方式と箱管理方式を両立。

薬剤ピッキングの常識を変える

Total management



写真は YS-DS-3600-Lです。

0402通知を受けて… 薬剤師以外の方でも ピッキング業務がその場で可能。

厚生労働省より発出された「0402通知」を受けて、薬剤師業務のひとつである薬剤ピッキングを薬剤師以外の方でも行える環境になりました。「ドラッグステーション」は、きめ細やかな調剤を行う薬剤師の皆さまに代わり、処方内容に応じた薬品トレイを自動で目の前に搬送しますので、薬品を探す手間がかかりません。初めて使う方でも、正確にピッキング業務を行っていただけます。

自動薬剤ピッキング装置

DrugStation®

ピッキング業務をトータルマネジメント

「ドラッグステーション」は、ピッキング業務をノンストレスで行える抜群の操作性を発揮し、単純作業にかかる時間を軽減します。

薬剤師本来の業務である患者様と向き合う時間を創出することを目指し、ユヤマ独自のロボット技術と独創性をカタチにした国内初の自動薬剤ピッキング装置です。



1薬品を約13～30秒で反復作業

1薬品のトレイが約13～30秒間隔^{*}で反復作業します。作業間に、リフターが次の処方内容にある薬品トレイをピッキングスペースにセットし、順次庫内待機します。

次の処方時タイムラグなくスムーズに作業を行うことが可能です。どなたでも同じスピードで正確にピッキングを行えます。

※薬品数とピッキング作業者の慣れによって作業時間は変動します。

レセコンからの処方データを受信し、本体モニターに表示。

処方内容に応じた薬品トレイのシャッターがオープン。

端数錠剤をPTP端数カメラで撮影。

薬品を輪ゴム留め。

患者トレイで重量鑑査。



レセコンから処方データを受信

ピッキング詳細モニターを確認

シャッターOPEN

PTPシートをピッキング

枚数をカウント

ハサミでカット

端数鑑査^{*}
→ 判定結果「○」

輪ゴム留め

患者トレイへ入れる

重量鑑査 → 判定結果「○」

シャッター閉ボタンを押す

シャッターCLOSE

ジャーナル紙を出力

約3秒

約10～27秒

※モード切替により、PTP端数鑑査と重量鑑査を同時に行えます。

…… 作業者の動き …… ドラッグステーションの動き



搭載可能薬品数：約1,200種(約3,000箱)

※W3,600タイプ：ピッキング台1台構成の場合。
トレイの組み合わせにより搭載可能トレイ数は変動します。

薬品の使用量に応じて、柔軟に収納が出来るよう、S・M・L・LLの4タイプをご用意。


S・M・Lトレイの組み合わせ次第で約1,200種(約3,000箱)の薬品を搭載可能です。

正面イメージ図 (W3,600タイプ)

※全てL型トレイの場合のイメージ図です。

換算トレイ数

L型のみ	414個
M型のみ	552個
S型のみ	828個

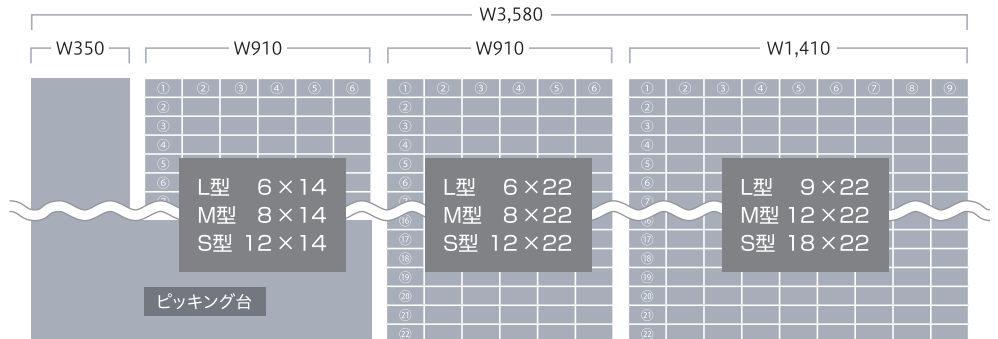


裏面イメージ図 (W3,600タイプ)

※全てL型トレイの場合のイメージ図です。

換算トレイ数

L型のみ	462個
M型のみ	616個
S型のみ	924個

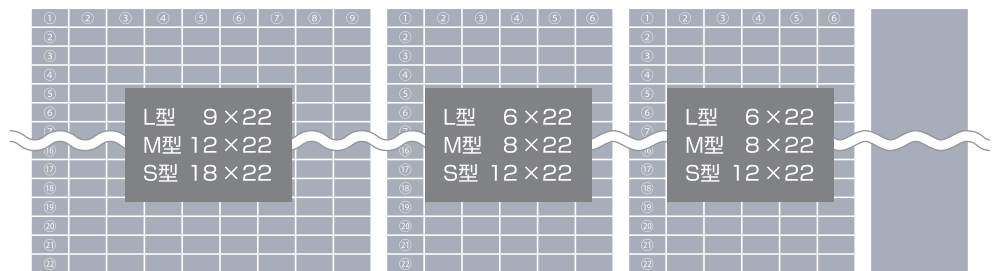

単位はmm




4個の薬品トレイをストック可能 PAT.

作業中、タイムラグを生まないための
トレイストック機能。

ピッキング台内部には、4個分のトレイストックスペースがあります。
トレイは、払出→移動の作業を繰り返し、その後リフターにより庫内の元の
保管場所へ順次運ばれます。タイムラグを生むことなく効率的に作業を
進めることができます。



■ピッキング台のトレイストック機能(側面から見たイメージ)

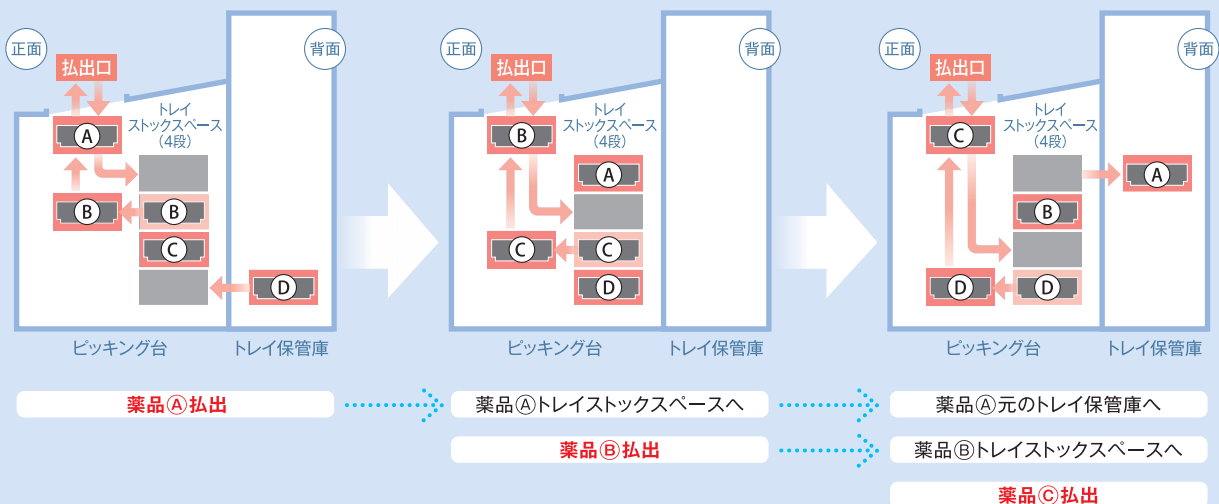

A close-up photograph of a robotic arm, likely from a pharmaceutical manufacturing line, positioned over a metal tray. The tray contains several blister packs of medicine. The packs are white with red and black text, including '500mg', '150mg', and '50mg'. The robotic arm is dark and has a blue screen on its upper section. The background is blurred, showing more of the industrial setting.

取り間違いを起こさない

Automation and human



error zero

より安全に、より効率的に。
**ヒューマンエラーゼロを追求した、
精巧な薬剤ピッキングシステム。**

様々な種類の医薬品が存在する日本において、「薬品の取り間違い」は大きな課題の1つです。「ドラッグステーション」は、処方内容に合わせて庫内の薬品トレイを自動でピッキングし、作業者の目の前まで運びます。

薬品を人の手で選んでピッキングする作業はありません。

安心して利用できる鑑査機能や照合機能などを搭載しており、ヒューマンエラーに結びつく原因を極限まで無くしたシステムです。

自動薬剤ピッキング装置

DrugStation®

ピッキング業務は新たなステージへ

ピッキング業務は「ドラッグステーション」によって、薬剤師以外の方や経験の浅い方、どなたでも同じ作業スピードで行うことが可能になりました。誰もが使える操作性に加え、様々なチェック・照合機能を備えたドラッグステーションが、「薬品の取り間違い」を防ぎます。



薬品の取り間違いなし PAT.

薬品をピッキングする際、シャッターは該当薬品の場所に合わせて開閉します。該当薬品の場所しか開かないように制御されているので、取り間違いの心配がありません。経験が浅い方でも正確なピッキングが可能です。



該当薬品が中央まで移動して、シャッター中央部のみ開閉します。

安心の鑑査機能

薬品ごとに、ピッキングした数量が正しいかを判定する機能を搭載。シートは重量で、また端数は画像で鑑査するため、1錠単位で正確に鑑査が可能です。軟膏や点眼薬なども、重量で鑑査を行います。



画像処理で端数を読み取り。



シート重量を測定し、重量鑑査。

薬品判定方法

重量や画像で鑑査を行い、判定結果はピッキング詳細モニターに大きな「○」「×」を表示し、同時に音でもお知らせします。ピッキングに誤りがあった場合は、薬品の数量が合うまで次の薬品のピッキングへ進めません。そのため、どなたでも安心してご利用いただけます。



払い出し方法を選択可能

払い出し数が100錠を超えた場合は、箱・ピロー包装・PTPシートのいずれかの方法で払い出しを選択でき、長期処方にも応じた払い出しが可能です。PTPシートのみならず、様々な形式で薬品管理ができるドラッグステーションならではの機能です。



充填作業は安全かつスピーディに

棚の前で薬品を探す手間がなく、その場での充填業務が可能です。

充填の際には、GS1データバーで薬品トレイを呼び出し、再度GS1データバーで薬品を照合することでシャッターが開く仕組みです。異なる薬品の混入リスクを回避するための安全設計を構築しています。在庫管理は理論値ではなく、実際の使用量と充填量を常に把握し、薬品のロット番号や有効期限も自動登録できるため、業務の効率化に寄与します。薬品トレイには①箱、②ピロー包装、③PTPシートなど、状況に合わせて充填が可能です。

【充填方法】

- ① GS1データバー照合/検索条件で薬品トレイを呼び出し
- ② 薬品トレイが払い出し口まで移動
- ③ 再度GS1データバーで薬品照合
- ④ シャッターが開き、充填作業を行う



※GS1データバーによる照合機能 PAT.



まとめて充填（充填作業専用モード）

充填作業専用モードにすることで、左右の薬品トレイシャッター部へ交互に振り分けれます。連続して充填することが可能です。



充填モード

種別モード

?

バーコードをスキャンするか検索条件を設定して下さい。

バーコードモード

トレイ検索

🔍

検索条件

検索条件を表示 ▼

全選択

全選択解除

他のピッキング台にリストを分岐

🔄

充填リスト発行

✕

対象	トレイ No	枝No	薬品	充填率	基準在庫	在庫	ロット有効期限
🟢	0295	1	ランパゾール0.0錠 1.5 mg (N10)	43%	50	344	GE0039 2029.12
🟢	0294	1	ロズバスタチン錠 2.5 mg (D5E F)	97%	50	779	79830 2026.10
🟢	0296	1	マブリン錠 3.30 mg	13%	50	100	23M001 2026.10

充填数: 1/3件

👉

まとめてスキャンして充填

中断

薬品トレイ移動

ランパゾール0.0錠 1.5 mg (N10)



枝号トレイ 0292

関連トレイ

0295

ピロ充填

在庫数: 344

🔗

リストリスト

ロット

GE0039

有効期限

📅

2029.12

在庫数

充填数

100

確認

充填モード画面

割り込み充填 PAT.

向かって右側の充填側シャッターへ充填対象の薬品を呼び出すことで、割り込み充填が可能です。ピッキング側シャッターが閉まらない限り、充填側のシャッターは開かないので、安心して割り込み充填ができます。払い出し時に欠品した場合はその場で充填業務を行い、払い出しを再開することが可能です。



ピッキング側のシャッターが閉まらない限り、充填側のシャッターは開きません。

棚卸モードで在庫管理を簡単に

棚卸モードを使用することで、在庫管理を簡単に行うことが可能です。操作しやすい管理画面で、よりスピーディーな在庫管理を実現します。



ピッキング履歴シートで簡単に目視確認

ドラッグステーションから出力される「ピッキング履歴シート」には、処方内の自動払い出し以外の手払い出しを行う薬品名を印字することが可能です。

DSピッキング履歴

払出No: 395
患者名: テスト 太郎様
日付: 20XX年XX月XX日(XX曜日)

薬品数 1薬品

薬品名 結果
マグミット錠30mg 〇
目標 総量 90T 0
実績 90T 0

DS以外払出薬品数 1薬品

薬品名
メジコン錠15mg

担当: 管理者(デモ)
20XX年XX月XX日(曜日) XX時XX分XX秒


ドラッグステーションからの払い出し薬品

ドラッグステーションに実装されていない払い出し対象薬品

非常時にも安心のセーフティマネジメント PAT.

付属のノートPCと、非常時用のジャーナルプリンター。

急な停電などの非常時を想定し、付属のノートPCと電池で動くジャーナルプリンターを標準装備。ノートPCは、ドラッグステーション内蔵PCと最新のトレイ棚位置を常に同期通信しているので、ノートPCからピッキング用の指示箋を出力することが可能です。

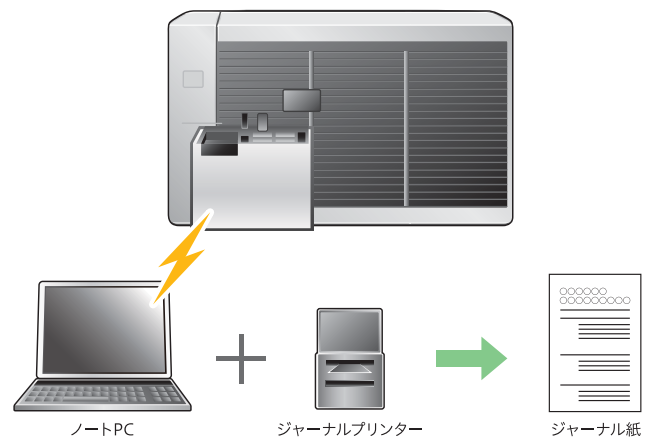

印字されたジャーナル紙とトレイ棚番で、手動ピッキングが可能です。

ドラッグステーション本体は、専用キーで解錠し手動で扉の開閉をすることができます。薬品名・数量・トレイ棚番が印字されたジャーナル紙を見ながら手動でピッキングすることが可能です。非常時でも安心できるセーフティマネジメント機能です。



薬品名・数量・トレイ棚番をジャーナル紙で確認。



豊富なトレイバリエーション

基本トレイは4種類、9バリエーション。

トレイバリエーションは、S・M・L・LL・1/2S・1/2M・1/2L・1/5L・1/2LLの計9種類。

薬品の大きさや使用量に合わせて選択可能です。



左より **S** **M** **L** **LL**

Sトレイ : W 52 × H 55 × D245mm

Mトレイ : W 87 × H 55 × D245mm

Lトレイ : W122 × H 55 × D245mm

LLトレイ : W122 × H116 × D245mm



1/2S



1/2M



1/2L



1/5L




1/2LL

フレキシブルな薬品搭載方法

トレイに1つの薬品だけでなく、仕切り板を入れることで違う剤形の薬品を入れ込むなど、様々な薬品の搭載が可能です。

また、使用量や薬品の大きさに応じて、トレイに箱やピロー包装、PTPシートなどを入れることが可能です。


搭載例

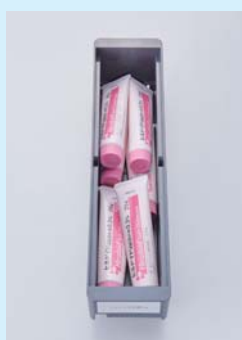

Sトレイ

ヒルドイド
ソフト軟膏

軟膏チューブ

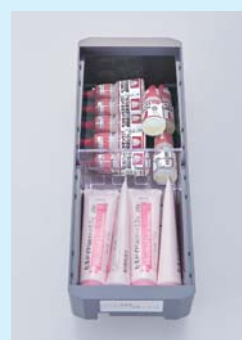

1/2Mトレイ

ベガモックス
点眼液0.5%
+
ヒルドイド
ソフト軟膏

点眼
+
軟膏チューブ



Lトレイ

端数ポケットあり

マグミット錠
330mg

ピロー包装
+
PTPシート
+
端数



1/2Lトレイ

端数ポケットあり

ロキソプロフェン
錠60mg
+
マグミット錠
330mg

箱
+
ピロー包装
+
PTPシート

様々な薬品に対応

PTPシート／漢方／点眼／軟膏／予製した分包品など、ピッキング可能な薬品が対象です。

PTPシート
×
5種



箱
＋
ピロー包装
＋
PTPシート



点眼
＋
軟膏



漢方



分包品



払い出し頻度に応じた運用が可能

払い出し時に、使用頻度の低い薬品は箱のまま、すぐに払い出しできるように使用頻度の高い薬品はPTPシートでトレイに収納するなど、患者様を待たせないよう、払い出しの頻度に合わせた運用が可能です。



Lトレイ

ユヤマ社製のL型ケースの
内容量がそのまま、
Lトレイに入ります。

L型ケース内容量：マグミット錠330mg
100錠×6ピロー包装

LLトレイ

アタラックス-
Pカプセル
25mg箱
×
10個



LLトレイに入らない薬品箱を
LLトレイに収納し、管理する
ことができます。
マスタ管理も行うため、
正確に残数管理を行うことが
できます。

端数ポケット (M/L搭載可)



簡単に端数を取り出せる
端数ポケットの搭載が可能です。
設置することで端数をすぐに
ピッキングできます。

D:85mm

※S、1/2S、1/5L、LL、1/2LL
トレイは設置不可。



Total management



- ① 自動入庫ユニット(オプション)
- ② DS Box Unit 1,310type
- ③ YS-DS-3600-L

of medicine boxes

薬品取り揃え業務のターニングポイント。
薬品箱に対応した
自動入出庫装置 登場。

DS Box Unitを連結することで、ドラッグステーションのトレイ管理方式に箱管理方式を加え、より柔軟な医薬品取り揃え業務を可能にしました。入荷された薬品やすでに在庫されている薬品に対して箱のままでロット番号や有効期限管理を実現します。箱単位での自動入出庫によって、ピッキング業務の効率は飛躍的に向上します。

自動薬剤ピッキング装置

自動薬品箱入出庫装置


DrugStation® with **DS Box Unit**

箱単位の進化形薬品自動倉庫 PAT.P

トレイ管理方式に加え薬品箱単位での自動入出庫を可能にすることで、トータルな薬品取り揃え業務を大幅に簡素化できます。また、自動入庫ユニット(オプション)を連結すると、折りコン※のまま庫内にセットするだけでDS Box Unitへ自動で入庫します。※使用可能な折りコンには制限があります。



自動入庫(自動入庫ユニット)

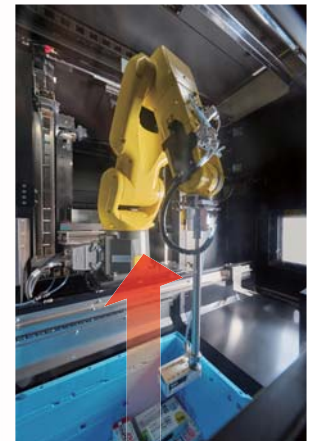

折りコンを庫内に入れるだけで、ロボットアームが1箱ずつ吸着、識別し、入庫作業を代替します。

※上下2段に入庫場所があります。
※折りコンのサイズによっては、最大4ケースまで投入できます。

① 充填口

DS Box Unit への薬品入庫はバーコードリーダーで照合した薬品箱を庫内に置くだけです。どなたでも簡単に入庫作業を行えます。



② 薬品箱レーン

ドラッグステーション本体から払い出しを行う際、不足分は自動的にDS Box Unitから対象の薬品を出庫させます。



薬品箱が自動でピッキング台まで運ばれます。

③ 薬品箱排出口

DS Box Unitから対象の薬品箱を出庫させるので、ドラッグステーション本体の薬品トレイにその場で充填できます。



移動距離
ゼロ!

薬品トレイへの充填も、その場で可能です。



処方量に対し、薬品トレイ内の在庫量が足りない分を出庫します。




ドラッグステーションに搭載されていない薬品は、残数を印字したラベルを貼り付けDS Box Unitへ入庫します。

■安心してご利用頂く為に

万が一のトラブル発生時も早期エラー把握と迅速な初動対応を可能にした「見守りサービス」や「リモートメンテナンス」、「薬品マスターデータの自動配信機能」など安心してご利用いただくための機能を搭載しています。


見守りサービス

エラーイベント発生メール機能

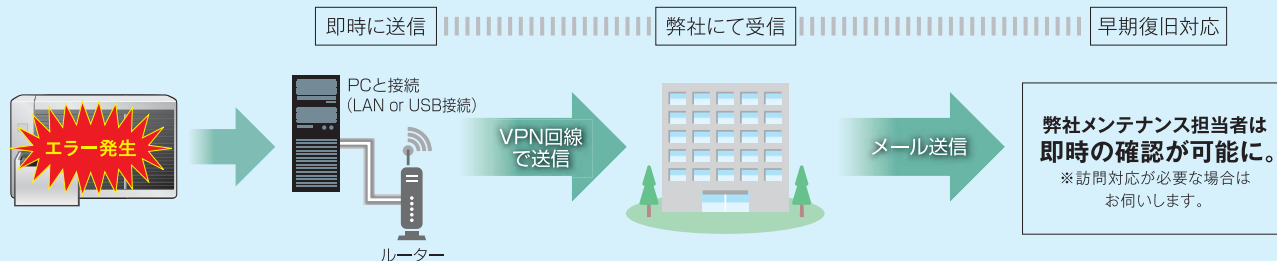

稼働状況レポート発信機能

機械を止めないこと、安定稼働させることを優先して、IoTを利用した故障予知を取り入れました。
「稼働状況レポート」を発信し、故障発生前に部品の劣化状況を見極め、あらかじめ交換を行います。

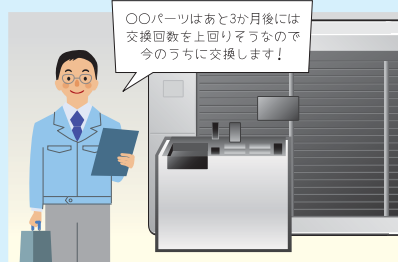

リモートメンテナンス機能


リモートで状態を把握し、早急に対応。

※ユーザー認証後、リモートで操作し復旧対応する場合もあります。



薬品マスターデータ自動配信機能

自動薬剤ピッキング装置ドラッグステーションは、薬品に関するマザーマスターデータをVPN接続を通じて自動配信します。薬品マスタの更新作業は手間なく行っていくことができます。

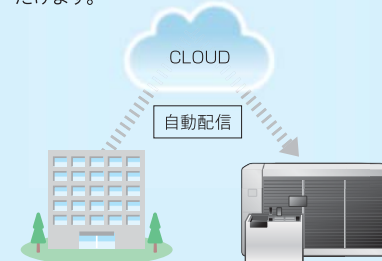

システム連動が織りなすトータルサポートシステム PAT.

※連動イメージ。掲載機材は一例。

ドラッグステーションは、YUNiCOMなど上位システムとの連動により、搭載薬品や搭載外薬品の振り分けを行い、調剤業務の効率化を図ることが可能です。また、NSIPS®との連動も可能です。

YUYAMAは薬剤師の皆さまをトータルサポートいたします。



※連動可能なシステム・機器の詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。

■サイズ紹介

※バリエーションは全19タイプございます。表記の図は一例です。

w1,300 type

型式：YS-DS-1300 (受注生産)

型式	全Sトレイ数	全Mトレイ数	全Lトレイ数
—	432	288	216



w2,200 type

型式：YS-DS-2200 (受注生産)

型式	全Sトレイ数	全Mトレイ数	全Lトレイ数
—	960	640	480



w2,700 type

型式：YS-DS-2700- (L/R)


型式	全Sトレイ数	全Mトレイ数	全Lトレイ数
L	1,224	816	612
R	1,176	784	588



w3,600 type

型式：YS-DS-3600- (L/R/W)

型式	全Sトレイ数	全Mトレイ数	全Lトレイ数
L	1,752	1,168	876
R	1,704	1,136	852
W	1,608	1,072	804

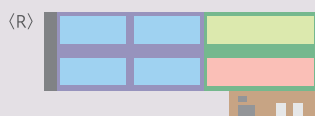

w4,500 type

型式：YS-DS-4500- (L/R/W)

型式	全Sトレイ数	全Mトレイ数	全Lトレイ数
L	2,280	1,520	1,140
R	2,232	1,488	1,116
W	2,136	1,424	1,068



w5,400 type

型式：YS-DS-5400- (L/R/W)

型式	全Sトレイ数	全Mトレイ数	全Lトレイ数
W	2,664	1,776	1,322
LW	2,658	1,772	1,329
RW	2,610	1,740	1,305



w6,300 type

型式：YS-DS-6300-
(W/LW/RW)
(受注生産)


型式	全Sトレイ数	全Mトレイ数	全Lトレイ数
W	3,192	2,128	1,596
LW	3,186	2,124	1,593
RW	3,138	2,092	1,569



w7,200 type

型式：YS-DS-7200-
(W/LW/RW)
(受注生産)

型式	全Sトレイ数	全Mトレイ数	全Lトレイ数
W	3,720	2,480	1,860
LW	3,714	2,476	1,857
RW	3,666	2,444	1,833

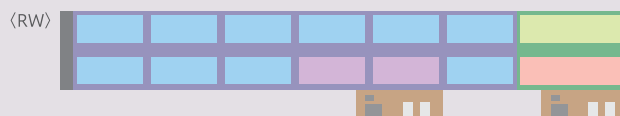

 …ピッキング台
  …全棚(12列×22段)
  …上半棚(12列×14段)
  … W1300type/W2200typeは DS Box Unit との連結が必須

 …1.5棚(18列×22段)
  …1.5上半棚(18列×14段)
 ※列数は全てSトレイの場合です。

■仕様

自動薬剤ピッキング装置

製品名	自動薬剤ピッキング装置 Drug Station (ドラッグステーション)	
型式	リフター1台／ピッキング台1台 構成 YS-DS-1300/2200 YS-DS-2700/3600/4500-L (R)	リフター2台／ピッキング台2台 構成 YS-DS-3600/4500-W YS-DS-5400/6300/7200-W (LW) (RW)
外形寸法	幅3,580 × 奥行き1,800 × 高さ2,285mm (YS-DS-3600-L)	
本体質量	約2,500kg (YS-DS-3600-L (R)) ※薬品トレイ込みの質量	
電源／消費電力	本体 : AC200V1φ 50Hz/60Hz 2.8kVA ピッキング台 : AC100V1φ 50Hz/60Hz 700VA	本体 : AC200V1φ 50Hz/60Hz 5.6kVA ピッキング台 : AC100V1φ 50Hz/60Hz 1kVA
製品バリエーション	YS-DS-1300、YS-DS-2200、 YS-DS-2700- (L/R)、YS-DS-3600- (L/R/W)、YS-DS-4500- (L/R/W)、 YS-DS-5400- (W/LW/RW)、YS-DS-6300- (L/R/W)、YS-DS-7200- (W/LW/RW)	
本体色	ホワイト (オプション：ブラック)	
使用環境	天面に吸気口及び電源口がありますので天井の高さに100mm以上の空間が必要です。 背面に吸気口がありますので背面壁までに100mm以上の空間が必要です。 機械内の薬品保管部分温度は、室温+3度までとなっております。医薬品に適した温度湿度環境で保管してください。	
オプション	UPS (無停電電源装置)、パライト、風防、 ピッキング台2台構成 (W3,600タイプ、W4,500タイプのみ)	


■外形寸法

自動薬剤ピッキング装置 DrugStation YS-DS-3600-L

※Drug Station・DS Box Unit・
自動入庫ユニットには
200Vの電源が必要です



NEMA規格 L6-30

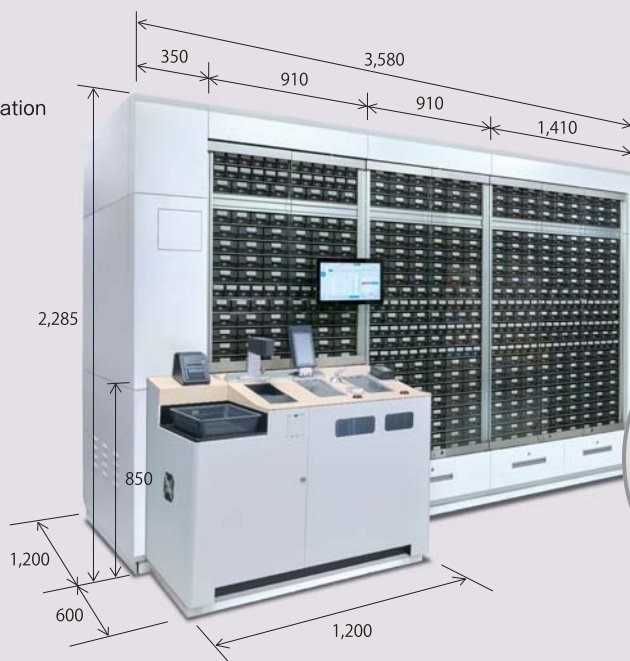


COLOR
OPTION


ブラック

単位はmm

自動薬品箱入出庫装置〈連結構成〉 YS-DS-3600-L + YS-DSBU-1310

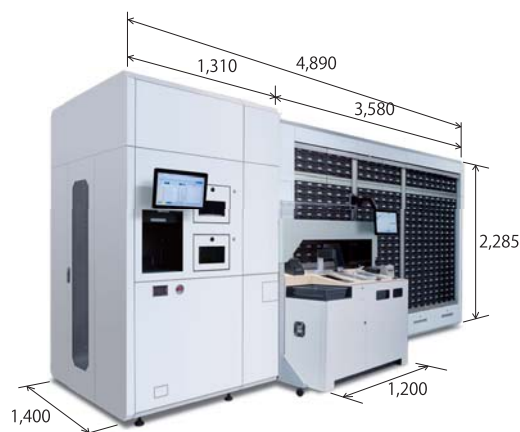

自動薬品箱入出庫装置〈連結構成/自動入庫ユニット含む〉 YS-DS-3600-L + YS-DSBU-1310 + YS-DSBU-AF (オプション)

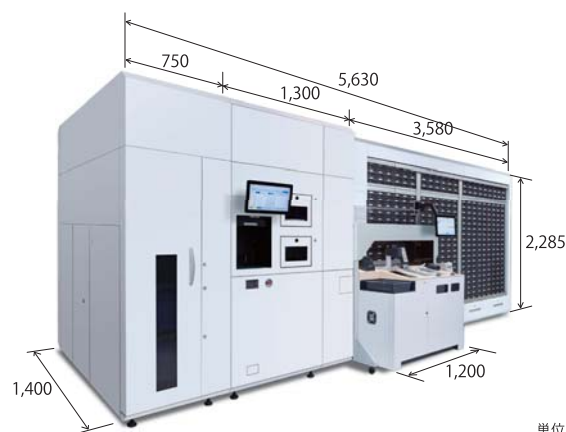

単位はmm

自動薬品箱入出庫装置※1

製 品 名	DS Box Unit		DS Box Unit + 自動入庫ユニット	
	1,310type	2,000type	2,050type	2,740type
型 式	YS-DSBU-1310	YS-DSBU-2000	YS-DSBU-1310 + YS-DSBU-AF	YS-DSBU-2000 + YS-DSBU-AF
外 形 寸 法	幅1,310mm × 奥行き1,400mm × 高さ2,285mm	幅2,000mm × 奥行き1,400mm × 高さ2,285mm	幅2,050mm × 奥行き1,400mm × 高さ2,285mm	幅2,740mm × 奥行き1,400mm × 高さ2,285mm
本 体 質 量	約1,342kg	約1,633kg	約1,903kg	約2,194kg
電 源 / 消 費 電 力	PC電源 : AC100V 1φ 50Hz/60Hz 100VA 本体 : AC200V 1φ 50Hz/60Hz 1.2kVA		PC電源 : AC100V 1φ 50Hz/60Hz 100VA 本体 : AC200V 1φ 50Hz/60Hz 1.2kVA 自動入庫ユニット : AC200V 1φ 50Hz/60Hz 1.3kVA	
搭 載 箱 数※2	約1,000箱	約2,200箱	約1,000箱	約2,200箱
搭載可能箱サイズ	最大：幅145mm × 長さ250mm × 高さ145mm 最小：幅15mm × 長さ70mm × 高さ15mm			
本 体 色	ホワイト(オプション：ブラック)			
使 用 環 境	天面に吸気口及び電源口がありますので天井の高さに100mm以上の空間が必要です。 背面に吸気口がありますので背面壁までに100mm以上の空間が必要です。 機械内の薬品保管部分温度は、室温+3度までとなっております。医薬品に適した温度湿度環境で保管してください。			
オ プ シ ョ ン	UPS(無停電電源装置)、パトライト			

※1 DS Box Unitは、幅600mm単位で増設可能です。

※2 1箱100錠入りの小箱包装にて搭載した場合の目安となります。



YUYAMAのSDGsへの取り組み
これまで、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、
持続可能な社会実現を目指し、これからも
活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals)。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。



NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け
コンピュータシステム間の連携システムです。
(商標登録 第5214610号)

Your Partner in Medication



製造元
株式会社

湯山製薬所

発売元
株式会社

ユヤマ

大阪本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東京本社

〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

※「Your Partner in Medication」は株式会社湯山製作所の登録商標です。

カタログの掲載内容は2026年7月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
Drug Stationは(株)湯山製作所の登録商標です。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



14900003
(株)ユヤマ



JQA-QM5424
(株)湯山製作所