

## 散薬鑑査システム

## PC-DXⅡP smart

※電子天秤は別売です。

## 機器構成

## 操作端末（タブレット）



アームタイプも選べます

作業スペースを  
広く取れる  
アーム式

## 薬品照合・分包機連動

## バーコード

GS1データバーを利用した薬品照合で  
確実なチェック。記録紙の  
バーコード読み取りで、  
分包機に処方展開します。

## 帳票出力

## ジャーナルプリンタのタイプは3種類



ナロープリンタ



ワイドプリンタ



卓上プリンタ


# 3つの使いやすさが業務効率を高め、 より安全性の高い薬剤鑑査を実現いたします。

## 使いやすさ 1

### マスタメンテナンスが らくらく

散薬鑑査システムPC-DXII P smartは、上位システムYUNiCOMのマスタ情報を自動で取り込みますので、機器ごとにマスタ更新作業を行わなくても、YUNiCOMの更新のみで、常に最新の情報で鑑査業務を行えます。

「利用者マスタ」「単位マスタ」「薬品マスタ」「GS1/JANマスタ」を自動で取り込み、「賦形マスタ」は選択して取り込むことが可能です。「薬瓶バーコード」およびYUNiCOMに登録のない「GS1」登録は、必要です。

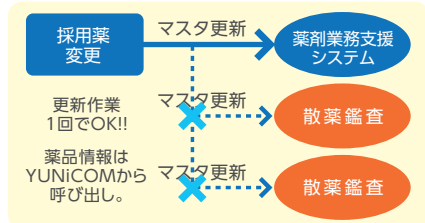

導入には、薬剤業務支援システムYUNiCOMが必須です。詳しい導入条件につきましてはお問い合わせください。

## 使いやすさ 2

### 見た目をすっきり


従来の鑑査システムは、機器同士をつないでいる線が天板の上にコードが散乱しがちで、作業スペースを圧迫しておりました。PC-DXII P smartは、機器同士つなぐ配線を少なくすることで、天板の上がすっきりと保たれ、作業スペースを広くお使いいただけます。




## 使いやすさ 3

### 印字レイアウトの 自由度UP

作業性が高いだけでなく、記録方法についても自由度の高いPC-DXII P smart。調剤記録紙に印字する内容を、操作画面上で簡単に選択・編集いただくことが可能です。導入後に、印字項目の増減や、フォントサイズの拡大・縮小など、設定をフレキシブルにご変更いただけます。

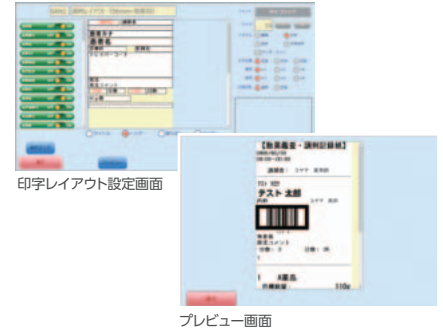

## 見やすい画面レイアウト

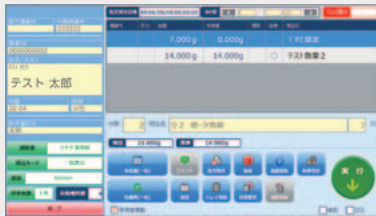

鑑査画面



天秤連動の秤量メーター




メニュー画面



処方一覧画面

## 賦形マスタの登録

PC-DXII P smart上で、賦形マスタに賦形薬品を登録しておくことで、上位システムに記録を残さずに賦形を行うことができます。賦形薬品の登録は、マスタダウンロードするか、手入力で設定することができ、対象年齢区間に対して、「基準量まで賦形」および「固定量を賦形」を設定することが可能です。

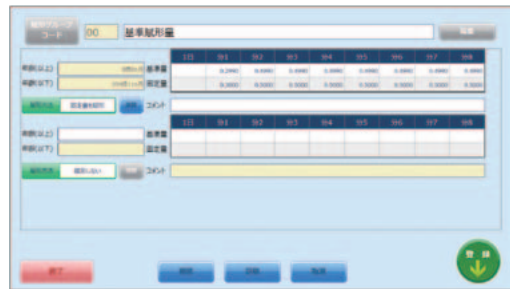

賦形マスタメンテナンス画面

## 帳票類 (サンプル)



調剤記録



薬品充填業務

## 錠剤カセット棚卸に便利、「錠数計算モード」



錠数計算画面

天秤(別売)使用の場合に、錠剤1錠あたりの重量を基準として簡単に錠数計算を行える機能を搭載。錠剤分包機の薬品の棚卸時にご活用いただけます。

### 仕様

| 製品名    | 散薬鑑査システム PC-DXII P smart                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 型式     | YS-PC-DXII-P                                                               |
| 機器構成   | 〔本体〕静電容量式10点マルチタッチ対応<br>11.6型タブレットPC<br>〔薬品照合〕バーコードリーダー<br>〔調剤記録〕ジャーナルプリンタ |
| 秤量     | 電子天秤(別売) CS-620D、CS-320DII                                                 |
| 処方チェック | なし(YUNiCOM上でチェック)                                                          |
| 連動機能   | 上位システム連動(YUNiCOMのみ)<br>散薬分包機連動(ユヤマ散薬分包機)                                   |
| 単体運用   | 不可。但し、YUNiCOM連動した上で、単体操作は可能。                                               |
| 電源     | AC100V±10% 50/60Hz                                                         |

※本製品導入には、薬剤業務支援システムYUNiCOMが必須となります。詳しい導入条件につきましては、お問い合わせください。

Your Partner in Medication



製造元 **湯山製薬所**  
株式会社

発売元 **ユヤマ**  
株式会社

大阪本社  
東京本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号  
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)  
〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号  
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2025年2月現在のものです。  
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の  
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」  
「無菌製剤室を作ろう!」



14900003  
(株) ユヤマ



JGA-QM5424  
(株) 湯山製薬所

## 水 剤 鑑 査 シ ス テ ム


## PC-DX IIW smart



※液量計測装置はオプションです。

## 機 器 構 成

## 操 作 端 末 ( タ ブ レ ッ ト )

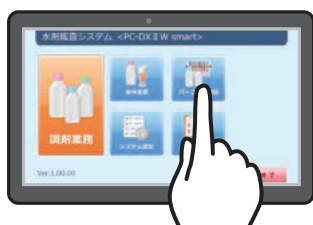

アームタイプも選べます

作業スペースを  
広く取る  
アーム式

## 薬 品 照 合

## バーコード

GS1データベースを  
利用した薬品照合で  
確実なチェック。

## 帳 票 出 力

## ジャーナルプリンタのタイプは3種類



ナロープリンタ



ワイドプリンタ



卓上プリンタ


# 3つの使いやすさが業務効率を高め、 より安全性の高い薬剤鑑査を実現いたします。

使いやすさ  
1

## マスタメンテナンスが らくらく

水剤鑑査システムPC-DXIIW smartは、上位システムYUNICOMのマスタ情報を自動で取り込みますので、機器ごとにマスタ更新作業を行わなくても、YUNICOMの更新のみで、常に最新の情報で鑑査業務を行えます。

「利用者マスタ」「単位マスタ」「薬品マスタ」「GS1/JANマスタ」を自動で取り込み、「薬品バーコード」およびYUNICOMに登録のない「GS1」登録は、必要です。

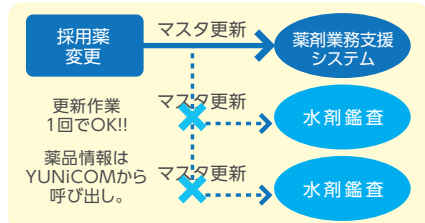

導入には、薬剤業務支援システムYUNICOMが必須です。詳しい導入条件につきましてはお問い合わせください。

使いやすさ  
2

## 見た目をすっきり


従来の鑑査システムは、機器どうしをつないでいる線が天板の上にコードが散乱しがちで、作業スペースを圧迫しておりました。PC-DXIIW smartは、機器どうしつなぐ配線を少なくすることで、天板の上がすっきりと保たれ、作業スペースを広くお使いいただけます。



使いやすさ  
3

## 印字レイアウトの 自由度UP


作業性が高いだけでなく、記録方法についても自由度の高いPC-DXIIW smart。調剤記録紙に印字する内容を、操作画面上で簡単に選択・編集いただくことが可能です。導入後に、印字項目の増減や、フォントサイズの拡大・縮小など、設定をフレキシブルにご変更いただけます。

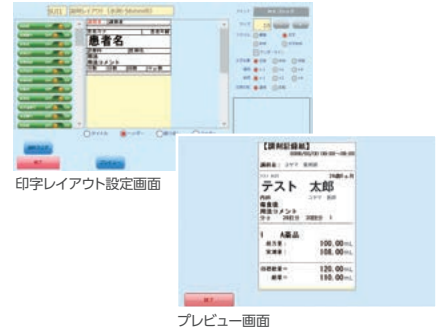

## 見やすい画面レイアウト




鑑査画面

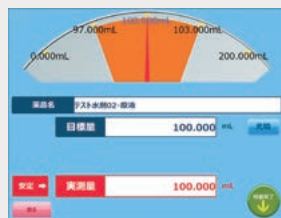

天秤運動の秤量メーター



メニュー画面

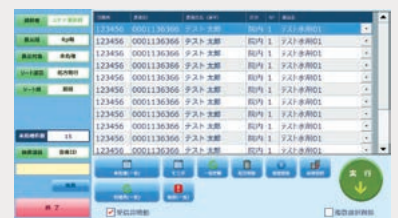

処方一覧画面

## 選べる計量方法

### 液量計測

液量計の計測域は1.0ml~200mlまで対応。  
※メスシリンダー(20、50、100、200ml)は別売。

### オプション



液量計測装置

### 秤量

### 別売

軟膏鑑査にも  
対応可能

電子天秤



## 帳票類(サンプル)


|              |      |                        |
|--------------|------|------------------------|
| 【調剤記録紙】      |      | 0000/00/00 00:00~00:00 |
| 薬剤師: ユヤマ 薬剤師 |      | 印字機: 〇                 |
| テスト太郎        |      | 〇ヤマ 漢字                 |
| 1日1回 薬物投与    | 1日1回 | 5/1(3)                 |
| テスト水剤01      |      | 処方量: 10.000ml          |
|              |      | 実量量: 50.000ml          |
| テスト水剤02・原液   |      | 処方量: 20.000ml          |
|              |      | 実量量: 100.000ml         |
| 目標総量=        |      | 150.000ml              |
| 総量=          |      | 150.000ml              |

調剤記録

|              |  |                        |
|--------------|--|------------------------|
| 完薬業務記録:      |  | 0000/00/00 00:00~00:00 |
| 実施者: ユヤマ 薬剤師 |  | 発注日: 0000/00/00        |
| テスト水剤02・原液   |  | 有効期限: 〇〇〇〇年〇月 〇〇日      |
| テスト水剤02・原液   |  | 有効期限: 〇〇〇〇年〇月 〇〇日      |

薬品充填業務

## 錠剤カセット棚卸に便利、「錠数計算モード」

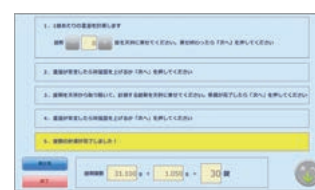

錠数計算画面

天秤(別売)使用の場合に、錠剤1錠あたりの重量を基準として簡単に錠数計算を行える機能を搭載。錠剤分包機の薬品の棚卸時にご活用いただけます。

### 仕様

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名    | 水剤鑑査システム PC-DXIIW smart                                                       |
| 型式     | YS-PC-DXII-W                                                                  |
| 機器構成   | [本体] 静電容量式10点マルチタッチ対応<br>11.6型タブレットPC<br>[薬品照合] バーコードリーダー<br>[調剤記録] ジャーナルプリンタ |
| 計量方法   | 超音波による液量計測もしくは秤量                                                              |
| 計量機器   | [液量計測] 液量計測装置(オプション)<br>[秤量] 電子天秤(別売) CS-620D、CS-320DII                       |
| 処方チェック | なし(YUNICOM上でチェック)                                                             |
| 連動機能   | 上位システム連動(YUNICOMのみ)                                                           |
| 単体運用   | 不可。但し、YUNICOM連動した上で、単体操作は可能。                                                  |
| 電源     | AC100V±10% 50/60Hz                                                            |

※本製品導入には、薬剤業務支援システムYUNICOMが必須となります。  
詳しい導入条件につきましては、お問い合わせください。

Your Partner in Medication



製造元  
株式会社

湯山製薬所

発売元  
株式会社

ユヤマ

大阪本社

東京本社

〒561-0841 大阪府豊中市市神口1丁目4番30号

TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号

TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

Medical Paradise! のアドレス [www.yuyama.co.jp/](http://www.yuyama.co.jp/) アクセスをお待ちしています。

カタログの掲載内容は2020年7月現在のものです。  
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。



(株)ユヤマは、2008年8月「保健医療福祉分野のプライバシーマーク」認定事業者となりました。【保健医療福祉分野のプライバシーマーク】は、一般事業者では取り扱わない特定の機微な個人情報等を主として取り扱う保健・医療・福祉分野に関連する事業者が対象とされ、一般事業者のプライバシーマークとは特に区別されています。

(株)湯山製薬所は、2003年3月にISO9001(2000年版)を取得し、2010年10月にはISO9001(2008年版)を取得しました。品質保証のプロセス管理に加えて、顧客満足向上の追求を含めた認証です。

無償プレゼント実施中!  
「開局でお手伝いできること」  
「無償製剤室を作ろう!」

