

Your Partner in Medication

yuyama

進化を遂げた
天秤みたいな鑑査システム。



It's All New

電子天秤一体型鑑査システム

ワンディEX2
onedy **EX2**

コンセプト、ボディサイズそのまま、 大幅機能充実でリニューアル。



パソコン 電子天秤

One-Body!




ワンディEX2 **onedy EX2**



省スペース設置が可能な天秤一体型の鑑査システム(PAT.)として一世を風靡し、特にスペースに制限の多い調剤薬局を中心に、多くの施設様でご利用いただいている**onedy**(ワンディ)。
天秤一体型、大型画面採用、目移りなしという基本コンセプトはそのままに、多くの機能を携えて**onedy EX2**(ワンディ・イーエックス2)としてオールリニューアル。他の追随を許しません。

ボディサイズは従来のまま メンテ面への配慮も欠かしません。

多くの機能が追加されて、ボディサイズが大きくなってしまつては…。いえ、そんなことはありません。
onedy EX2は、従来のボディサイズをそのまま踏襲しつつ、さらに鑑査システムでの問題点の1つ、「散剤の本体内部への侵入」を極限にまで防止するための設計を施しました。曲線を多く用いたボディデザインによる清掃・拭き取りしやすさの向上、電源ボタンのシートスイッチ化、背面接続ポートの一本化で配線スッキリ、そして内部に侵入しやすい箇所などは本体下部に極力配置するなど、実際に使用される立場、メンテナンスされる立場を理解してこそそのカタチだといえます。

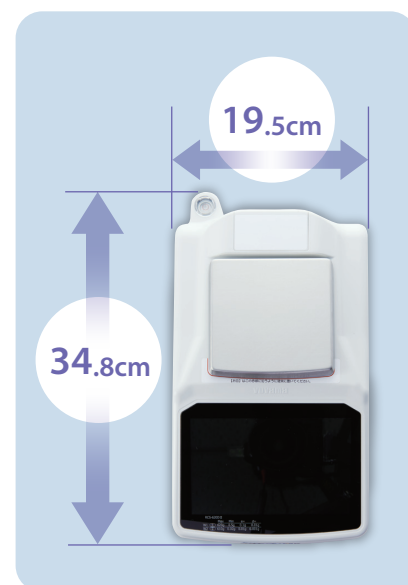

従来比
1.34倍



7インチワイド大型液晶 タッチパネルディスプレイ採用。

タッチディスプレイ画面は従来の5.7インチサイズから7インチワイドへと大型化。視認性がさらに高まりました。そして、スマートフォンなどでもおなじみのフリック操作による画面スライドやスクロール、ピンチイン・アウトによる拡大・縮小などの直感的な操作が可能になり、日常の操作面でストレスを感じさせません。

※画面配色は本体色に馴染む「ピンク」基調と「紺」基調からお好みで選択いただけます。

onedry EX2は単体での使用もちろん可能ですが、
上位システムとの連動、ユヤマ散薬分包機との連動、
処方箋に印字されたQRコードから処方自動取り込み連動など、機能がますます充実し、
様々な施設様でさらに効率のよい環境を創出できるようになりました。

秤量目標値、グラフィックバーなど、
大型画面に見やすい表示レイアウトの秤量中画面。

テスト 太郎	地方番号	20XX/08/20 14:05		≡
日数	分數	年齢	体重	メニュー
形態	薬品名	1日量 (実重量)	総重量 (実重量)	
	アキネット糖粒 1%	14.000g	14.000g	
	アルサルミン糖粒 9.0%	22.800g	22.800g	
	ガモファア散 2%	30.900g	30.900g	
合計		68.500g	68.500g	
入力	トビロ型番 分岐取置前 ③	印刷	再算定	OK 分割
				取消

薬品管理 日数入力 2013/06/04 14:54

3日	5日	7日
14日	頓服	外用
入力	クリア	中止

アキネトン細粒 1%

(歩) 成人 一日常用量 (全) : 0.3g ~ 0.6g

一日量 1.250 g

目標総量 8.750 g

経過 : 7日
分注 : 3回

OK 戻る



システム運動メニュー
戻る



開次



患者ID



引換券番号



入金



記録済み



操作モード

システム運動(降順)

患者ID	データ
9999999999	データ
0000000001	データ
0000000001	データ

システム運動[降期]

終了

処方薬情報▶

患者ID	患者名	生年月日	診療科	Rd	処方日	降期
9999999999	テスト 太郎	1999/01/01	内科	1	20XX/08/12	☒
0000000001	テスト 花子	1982/08/08	内科	1	20XX/07/26	☐
0000000001	テスト 二郎	1982/08/08	内科	1	20XX/07/18	☐

戻る 戻る 戻る 戻る 戻る

戻る 戻る 戻る 戻る 戻る

Figure 1-1 shows a sequence of three screenshots from the 'FBI' application, illustrating the process of adding a new contact. The first screenshot shows the '分台機情報入力' (Add Line Machine Information) screen, which has a green header bar and a list of fields for input. The second screenshot shows the '情報' (Information) screen, which also has a green header bar and a list of fields. The third screenshot shows the 'FBI' screen, which has a green header bar and a list of fields. The screenshots are arranged in a slightly overlapping manner, showing the progression of the user interface.

最大分包数: 999

分割回数: 3 曜日数: 3 能分包装: 9

分割結果: 2日分, 1日分

分割日数: 分包数: 6包

曜日割り:

RFID秤量皿

ヤマハ散薬分包機

処方薬品情報		終了
患者名: テストー郎		
◀ 処方情報一覧		
形態	薬品名	処方量
Rp1: 分3、毎食後服用 7日分		
	ロキソニン錠60mg	3,000円
	セブツクカプセル50	3,000円
Rp2: 発熱・疼痛時使用 14日分		
	【劇】ボルタレンサボ25mg	1,000個
Rp3: 1日1回(パップ剤) 全量		

■ 玆方讀込時画面

充 填

GS1データバー対応のバーコードスキャナで充填時チェックももちろんOK。確実な充填で薬品の入れ間違いを防止します。有効期限を手入力すれば、有効期限切れチェックも可能。




充填 終了

薬品名: アキネトン細粒 1%
 充填量: 488.8g 在庫量: 0.0g

充填者: テスト 太郎
 薬瓶: 0052
 元瓶: 4946842509539
 ロット番号:
 有効期限:

印刷有 再秤量 充填


充填画面

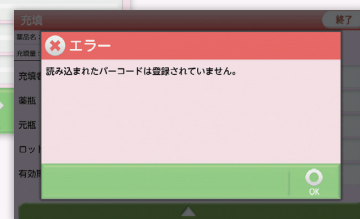

充填エラー画面

統計・帳票出力機能

調剤インシデント、調剤記録などの統計出力機能を装備。ジャーナルプリンターからの帳票出力またはCSVデータでの出力が可能です。

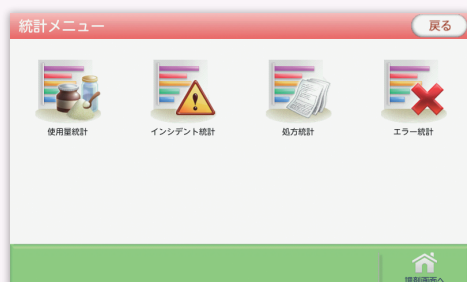

統計メニュー

インシデント統計 検索 終了

統計: インシデント[46件]

発生日時	インシデント区分	薬品名	薬	使用量統計
20XX/08/10 10:48:08	常用量エラー	アキネトン細粒 1%	散	統計: 使用量[8件]
20XX/08/10 10:53:07	常用量エラー	アキネトン細粒 1%	散	薬品コード
20XX/08/10 10:53:42	用量間違い	アキネトン細粒 1%	散	1 アルサルミン細粒 90%
20XX/08/12 15:15:36	薬品未登録	アキネトン細粒 1%	散	2 ガモファール散 2%
20XX/08/12 15:15:36	薬品未登録	(局)乳酸カルシウム「ヨシダ」	散	3 アキリデン細粒 1%
20XX/08/12 15:15:36	薬品未登録	アキネトン細粒 1%	散	4 タスモリン散 1%
20XX/08/12 15:15:36	薬品未登録	アキネトン細粒 1%	散	5 ガスター散 2%
20XX/08/12 15:15:36	薬品未登録	アキネトン細粒 1%	散	6 ファモチジン散 2% 日医工
20XX/08/12 15:15:36	薬品未登録	アキネトン細粒 1%	散	7 アキネトン細粒 1%

印刷 プレビュー CSV

統計画面表示(インシデント)

統計画面表示(使用量)



帳票メニュー

調剤記録 戻る

-----調剤記録-----
 調剤者: テスト太郎
 20XX/08/10
 調剤開始/10:53
 年齢: 20.00歳 体重: 68.00Kg
 トレー: 0001
 アキネトン細粒 1%
 【実測値】
 5.90 g
 【理論値】 【計算値】
 1日量 10.00 g 1.97 g

印刷

出力プレビュー画面

ジャーナルプリンターからの出力帳票は、出力前にプレビューで内容確認いただけます。ピンチイン・アウト操作による拡大・縮小も可能です。

調剤記録(単体モード)

-----調剤記録-----
 調剤者: テスト 太郎
 20XX/08/21
 調剤開始/18:23
 年齢: 52.00歳 体重: 58.00Kg
 処方コメント: 処方コメントです。
 【調剤】カロナール細粒 20%
 【実測値】
 70.0 g
 【理論値】 【計算値】
 1日量 10.0 g 10.0 g
 1回量 3.3 g 3.3 g
 アキネトン細粒 1%
 【実測値】
 35.3 g
 【理論値】 【計算値】
 1日量 5.0 g 5.0 g
 1回量 1.7 g 1.7 g
 分割数: 0
 分割割合: 0
 薬包込全量 107.300g
 薬包込1日量 15.329g
 薬包込1回量 5.110g
 調剤終了/18:25

薬品充填業務

-----充填記録-----
 充填者: テスト 太郎
 アキネトン細粒 1%
 薬瓶: 0052 18:32
 元瓶: 4946842509539 18:32
 充填量 72.0 g
 充填日時 20XX/08/21 18:32:50
 -----充填記録-----
 充填者: テスト 太郎
 (局)カロナール細粒 20%
 薬瓶: 0086 18:33
 元瓶: 4987094030587 18:33
 充填量 107.0 g
 充填日時 20XX/08/21 18:33:37

使用薬品一覧

-----薬品使用量統計-----
 20XX/08/21 18:30
 件数: 9件
 -- #1 --
 薬品コード: 1
 薬品名: アルサルミン細粒 90%
 薬品区分: 散薬
 採用区分: 採用
 使用量: 14.500g
 -- #2 --
 薬品コード: 13
 薬品名: カロナール細粒 20%
 薬品区分: 散薬
 採用区分: 採用
 使用量: 385.100g
 -- #3 --
 薬品コード: 2
 薬品名: ガモファール散 2%
 薬品区分: 散薬
 採用区分: 採用
 使用量: 14.900g
 -- #4 --
 薬品コード: 3
 薬品名: アキネトン細粒 1%
 採用区分: 採用
 使用量: 96.000g
 -- #9 --
 薬品コード: 7
 薬品名: ストマルコン散 2%
 薬品区分: 散薬
 採用区分: 採用
 使用量: 111.900g

インシデント統計

-----インシデント統計-----
 20XX/08/21 18:29:37
 期間: 20XX/08/12 00:00:00
 ~20XX/08/12 23:59:59
 抽出患者名: テスト
 抽出薬品区分: 散薬
 件数: 4
 -- #1 --
 発生日時: 20XX/08/12 15:15:37
 インシデント区分: 常用量エラー
 薬品名: アキネトン細粒 1%
 薬品区分: 散薬
 患者名: テスト 一部
 調剤者名: テスト 太郎
 正常値: 0.470g
 異常値: 3.000g
 -- #2 --
 発生日時: 20XX/08/12 15:15:37
 インシデント区分: 常用量エラー
 薬品名: (局)乳酸カルシウム「ヨシダ」
 薬品区分: 散薬
 インシデント区分: 常用量エラー
 薬品名: (局)乳酸カルシウム「ヨシダ」
 薬品区分: 散薬
 患者名: テスト 一部
 調剤者名: テスト 太郎
 正常値: 0.783g
 異常値: 3.333g

※ 劇薬などの要注意薬品や、注意事項は白黒反転文字で印字されます。
 ※ 上記画面や帳票サンプルは実際のものと異なることがありますのでご了承ください。

マザーマスタ

散薬だけでなく、錠剤、水剤など全薬品のマザーマスタ約13,000件を標準搭載。うち10,000件を登録することが可能です。また、後発医薬品を簡単に検索できるメニューも新設。ジェネリック切り替えなどの際も簡単スムーズに登録を行っていただけます。



マスタメニュー

薬品マスタメンテナンス

薬品名: アキネトン細粒 1%

年齢	下限	上限	区分	禁忌	1回量	1日量	別添
0.00	999.00	全	◎	◎	0.000	0.000	0.300
0.00	1.00	全	◎	◎	6.000	6.000	6.000
0.00	3.00	Kg	◎	◎	1.000	2.000	3.000

マスタメンテナンス画面


後発医薬品マスタメンテナンス

先発医薬品コード	先発医薬品名	後発医薬品コード	後発医薬品名	削除
5	ガスター散 2%	2	ガモファール散 2%	☐
		6	ファモチジン散 2% 日医工	☒
		7	ストマルコン散 2%	☐
		8	ガスドック散 2%	☐
6120	アキネトン細粒 1%	3	アクリデン細粒 1%	☐


後発医薬品マスタメンテナンス画面

常用量・極量設定

マザーマスタの常用量チェック。任意に常用量の超過・不足の上限・下限を設定でき、さらに調剤不可とする極量設定も可能ですので、さらに安全な環境に。

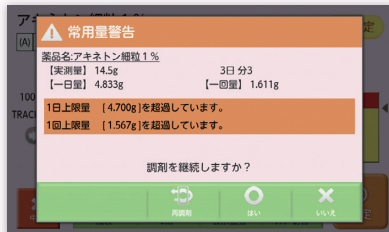


常用量警告 (PAT.)

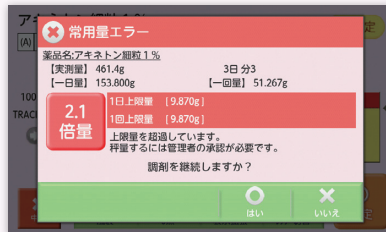

常用量エラー

常用量範囲を超えると管理権限者の承認が必要。

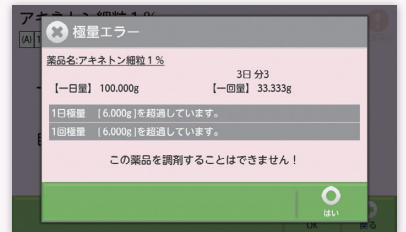

極量エラー

極量値を超えると調剤できません。

運用に応じて調剤者登録 & 選択

7種 (保守管理、管理者、一般、応援、研修、テクニシャン、学生) の中から選択して調剤者の権限に制限を設けることで、調剤後の登録時に承認を求めるようにすることもできます。誰が調剤したのかが判別できるように表示色を個別に設定可能。実際の調剤現場から研修現場など、様々なシチュエーションで活用できます。

調剤者選択

調剤者コード	調剤者名	調剤者区分
8	テスト 一郎	管理者
12	テスト 五郎	テクニシャン
10	テスト 三郎	研修
11	テスト 四郎	応援
9	テスト 二郎	一般
13	テスト 六郎	学生
7	瀬山製作所	保守管理

調剤者選択画面


音声・サウンド

onedry EX2には新たに薬品名やメッセージ、操作ガイダンスなどの音声読み上げ機能を標準装備。また、各場面での効果音も4種類のサウンドから任意に設定していただけます。



秤単体機能

鑑査システムとしてだけでなく、電子天秤の用途での使用もちろんOK。鑑査システムモードとの切り替えもワンタッチです。

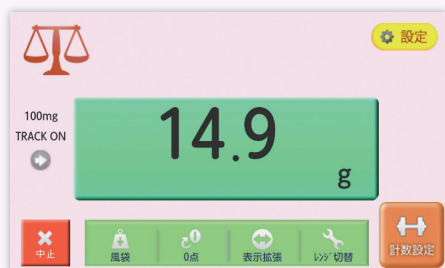

秤単体時画面

電池駆動対応 (オプション)

災害時など電気供給がままならない状況でも、緊急時対応機能として、オプションのバッテリーユニット (単3乾電池12本使用) を利用することで、約8時間使用することができます (弊社検証条件による)。



仕 様

品名	onedy EX2
型式	RCS-620DII(承認番号 第D1314号)
ディスプレイ	7インチワイドTFTカラー液晶タッチパネル(静電式・マルチタッチ)
薬品照合	バーコードスキャナ
プリンター	卓上小型ジャーナルプリンター(パーシャルカット機能付)
薬品登録数	10,000件(約13,000件の散薬、錠剤など全薬品マザーマスタ保有)
1処方内薬品数	50品目
チェック機能	常用量(常用量リミット、極量設定可)、配合変化、充填
調剤履歴／充填履歴	それぞれ10,000件まで
目量／秤量	0.1g・620g／0.01g・610g ※目盛拡張機能あり
精度等級	特定計量器非自動はかりⅡ級
外形寸法	本体：幅195×奥行348×高さ95mm(風防フード装着時：幅204×高さ178mm) バーコードリーダー：幅76×奥行70×高さ139.5mm ジャーナルプリンター：幅108×奥行165×高さ108mm
質量	約4.0kg(本体のみ)
電源	ACアダプター使用時：AC100V 50／60Hz バッテリー使用時：DC12V
消費電力	ACアダプター使用時：76VA(MAX) バッテリー使用時：36VA(MAX)
オプション	RFID読取装置、外付けバッテリーユニット(単3乾電池×12本使用)



風防フード装着時

※カタログ上に掲載されているQRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

本体カラーバリエーション(ピンク及び紺、写真は紺)



●調剤室のイメージに合わせて2色からお選びいただけます。



YUYAMAのSDGsへの取り組み
これまで、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、
持続可能な社会実現を目指し、これからも
活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。

〈設置上のご注意〉

●アースを必ず接続してください。●水平に設置してください。



NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け
コンピュータシステム間の連携システムです。
(商標登録 第5214610号)

Your Partner in Medication



製造元
株式会社

湯山製薬所

発売元
株式会社



大阪本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東京本社

〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

※Your Partner in Medicationは株式会社湯山製薬所の登録商標です。

カタログの掲載内容は2025年4月現在のものです。

製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



JQA-QM5424
(株)湯山製薬所